


User Manual  
取扱説明書  
使用说明书

COSBEAUTY

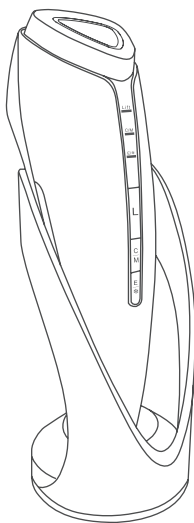

Lift Iron EX Face Refreshing Device

This book is instruction manual

Please read this manual carefully before using the device and keep it properly after reading.

本書は製品の説明書となります。

ご使用前に必ずよくお読み頂き大切に保管してください。

本手册为产品使用说明书

使用产品前请务必仔细阅读本说明书，阅读后并请妥善保管。

English	2
日本語	19
简体中文	41

## 目次

目次	19
安全上の注意	20
各部名称・セット内容	24
仕様	25
ご使用前に	26
プログラム一覧	31
リフトモード	32
クリーンモード	33
モイストモード	34
アイケアモード	35
クールモード	36
お手入れと保管方法	37
こんなときには	38
Q&A	40

## 安全上の注意

- ご使用になる前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産の損失を未然に防ぐものです。必ずお守りください。

### 危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性があり、リスクの度合いが高いと想定される内容を示します。

### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

### 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

※物的損害とは、家屋、家財、家畜、ペットに関わる拡大損害を示します。



禁止の行為であることを知らせるものです。



行為を強制・指示する内容を知らせるものです。

### 危険

下記の電子機器との併用は絶対にしないでください。



禁止

- ペースメーカーなどの体内植込型医用電子機器。
- 人工肺などの生命維持用医用電子機器。
- 心電計等の装置型医用電子機器。
- その他の治療器具との同時使用はしないでください。誤作動をまねく恐れがあります。

## 安全上の注意



### 警告

次の人は医師と相談してご使用ください。

- アトピー性皮膚炎の方
- アレルギー体質・金属アレルギーの方
- 特に肌が敏感な方
- ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方
- 心臓に障害のある方
- 急性（疼痛性）疾患のある方
- 悪性腫瘍のある方
- 顔面神経痛の方
- 妊娠中、授乳中の方
- 生理中の方
- 有熱性疾患の方
- 血圧異常の方
- 感染性疾患の方
- 結核症疾患の方
- 血友病疾患の方
- 歯の治療中の方
- 飲酒、薬を服用中、疲労が著しい時
- 目の手術をしたことがある方
- 強度の近視の方
- 現在病院で治療中の方

  
使用前  
に相談

次の部位には使用しないでください。

- 目や耳のまわり、眼球及び上まぶた（Eye Care モード & Cool モード < \* > 以外）
- 切り傷・整形手術をした部位・口内や陰部、粘膜など
- 顔面黒皮症の部分
- ニキビや吹出物で炎症を起こしている部分
- 化粧品などで、炎症を起こしている部分
- 痛覚、知覚障害を起こしている部分
- 皮膚の下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んである部分
- 痒みやほてり、物理的刺激などによる病的なシミのある部分
- 肌に炎症や異常を感じている部分



禁止

- 指定された用途以外の目的で使用しないでください。
- 100～240V 以外の電源を使用しないでください。火災や感電の可能性があります。
- 本製品、電源コード、電源アダプターが破損や変形をしている時は使用しないでください。
- 電源コードに負担をかけないでください。（無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重い物をのせない・熱いものに近づけない・束ねない・はさみ込まない・加工しない）

## 安全上の注意



禁止

- 充電台座、アダプターは防水ではありませんので、濡れた手で触れたり、コンセントを抜き差ししないでください。
- 充電スタンド及び電源アダプターを浴室や湿気の多い場所で使用しないでください。
- 自動車を運転しながら使用しないでください。強い刺激を受けると重大な事故やトラブルにつながる恐れがあります。
- 電源を入れた状態で長時間放置しないでください。事故や故障の原因になります
- ほかの電気製品（美顔器など）との同時使用はしないでください。
- 絶対に製品を改造・分解・修理しないでください。
- 乳幼児や子供に使用したり、手の届くところでの使用や保管をしないでください。
- 意思表示のできない方に使用しないでください。



必ず  
守る

- 使用しない時は、電源アダプターをコンセントから抜いてください。
- 本体に異音や異常（過熱や焦げた臭いがする等）を感じた場合はご使用中止し、電源を切ってください。
- 使用時間や使用頻度は取扱説明書の内容をよく読み、守ってください。
- 使用中に痛みや不調を感じた時や、使用后、肌に異常を感じた時は使用中止して専門医に相談してください。
- 使いはじめの方は、肌の様子を見ながら使用してください。



注意



禁止

- プレート部分を肌に強く押しつけたり、5秒以上、同一の部位にあて続けしないでください。
- 美容目的以外には使用しないでください。
- 落としたり、ぶつけたり、本体に強い衝撃を与えないでください。感電・発火・けがの恐れがあります。
- 損傷した場合は使用しないでください。感電・発火・けがの恐れがあります。
- 本製品に付属している AC アダプター以外使用しないでください。故障の原因となります。
- 充電アダプターをお手入れするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 充電アダプターが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。

## 安全上の注意



- 業務用として使用しないでください。また、不特定多数の人が使用する場所に置かないでください。
- ベンジン・シンナー・アルコールなどの薬品や殺菌・消毒剤で拭いたりしないでください。変形、変色、ひび割れなど故障・破損の原因となります。
- 家族および他人と共有しないでください。感染症の恐れがあります。
- ペットや家畜等の動物には使用したり、ふれる可能性のある場所に保管しないでください。
- ドライヤー等の熱風はあてないでください。高温による変形の恐れがあります。
- 本体や充電台座に水をかけたり、水につけたりしないでください。
- 本体、充電台座、充電アダプター及び充電用ケーブルを浴室や高温、多湿、直射日光の当たる場所に保管しないでください。




- 
- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用してください。
  - 使用中に身体に違和感を感じた場合は、使用を中止してください。
  - 使用中、使用後に肌の異常がみられるときは使用を中止し、医師に相談してください。
  - 肌の状態にあわせて使用してください。
  - 日焼け直後、ピーリングや刺激の強い化粧品との併用は控えてください。
  - 使用する時はプレートから保護キャップを外してください。
  - 本体を連続使用（主に Eye Care モード・Cool モード <※>）しないでください。本体内の温度が上昇し、Eye Care モード・Cool モード <※> の冷え方が弱くなったり安全の為、一定時間使用ができなくなったり、故障の原因となります。
  - Clean/Moist モード・Lift モード使用時は、プレート面と肌との間に常に化粧品があるようにしてください。化粧品が少ないとイオンの伝達が悪くなり効果が低下したり、肌が乾燥しているとチクチクと刺激を感じる場合があります。
  - 使用後は必ず電源を切ってください。
  - プラグの脱着時は、プラグ部分をもって確実に差し込んでください。コードをもって引き抜きますと故障の原因となります。
  - 使用後は清潔な布を水で濡らして固く絞り、プレートや本体の汚れをふき取ってください。薬品等は絶対に使用しないでください。



## 各部名称・セット内容

### 本体

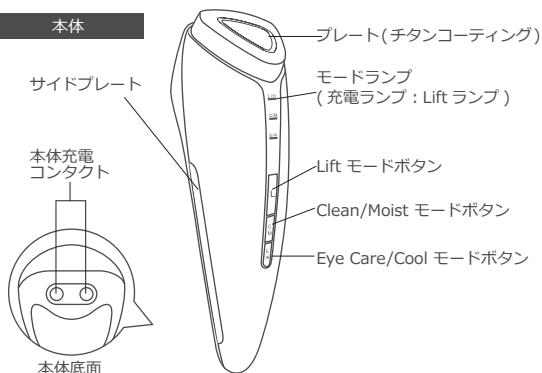


### 保護キャップ



### コットンリング



### 充電台座

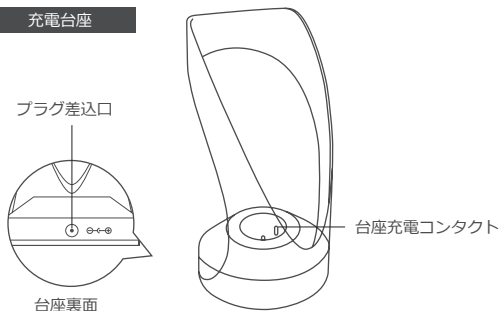


### 取扱説明書



※保証書付


### 充電アダプター

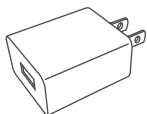

### 充電用ケーブル



### コットン

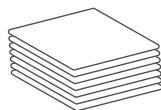

10 枚

※別売は行っておりません。

## 仕様

品名 : コスピューティーフットアイロン EX  
サイズ : 本体 約 W50 × H153 × D60 (mm)  
重量 : 本体 約 175 g / 充電台座約 65g  
電源 : 充電式 DC 5V 1000mAh Max  
充電時間 : 約 4 時間  
使用時間 : 約 70 分  
バッテリー : リチウムイオン電池 1200mAh  
材質 : ABS、アルミ (チタンコーティング)  
防水等級 : IPX5(本体) ※本体以外の付属品は防水ではありません。

### アダプター

電源 : 入力 AC100-240V 50/60Hz 0.25 A Max  
出力 DC 5V 1.0A

Made in China

### 電池の破棄

本製品にはリチウムイオン電池が使用されてます。  
廃棄の際はお客様がお住いの各自治体にお問い合わせの上、指示に従って廃棄してください。

## ご使用前に

 ご使用前にお読みになり、お守りください。

### ● 防水性能について

本体の防水等級はIPX5ですが、完全防水ではありません。本体及びその他付属品に水をかけたり、水につけたり、濡れた手で触れたりしないでください。浴室や湿気が多い場所で充電・保管しないでください。使用後は本体についた化粧品を拭き取ってください。

### ● 本体を充電する



- 購入直後や長時間使用しない場合は必ず本体を充電してください。
- 充電ランプが点滅から点灯に変わったら充電完了となります。
- ご使用後は本体や充電台座に残った化粧品などをふき取ってください。本体底面や充電台座の電極部分に残っていると、充電時にショートする恐れがあります。



1. 充電用ケーブルを充電スタンドに接続する。
2. 充電アダプターをコンセントに差し込む。
3. 充電スタンドに本体を設置する。


### 充電中のランプ表示

※充電ランプ = Lift モードランプ

充電のお知らせ	赤点滅
充電中	赤点滅
充電完了	白点灯

### 充電時間の目安

充電時間	約 240 分
作動時間	約 70 分

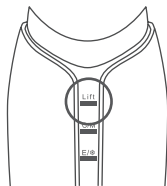

※満充電直後からの作動時間です。


※充電時間、作動時間は使用モード、使用頻度、使用方法、使用環境によって変わります。

### ● 充電が完了したら

充電完了後に長時間充電を続けるとバッテリーの寿命が著しく短くなります。

## ご使用前に

### ● ボタンとLED表示

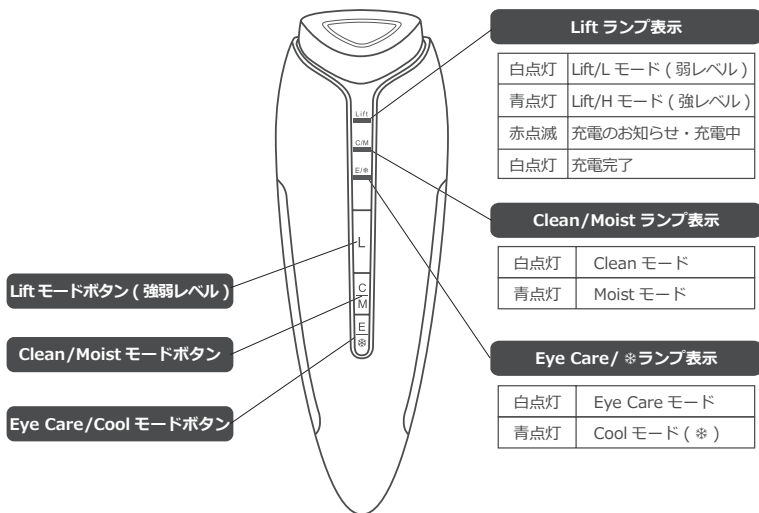

### ● ボタン操作とモード切替

#### Lift/ L・Lift/ Hモードの切替

- ・Liftモードには微弱な電流が搭載されています。お顔のトレーニングをサポートします。
- ・ボタンを短押しするとレベルを調節できます。初めてご使用する場合や慣れるまでは、必ず弱レベルでご使用ください。肌の部位や状態に合わせてレベルをお選びください。(L = Low H = High)

Liftモードボタンを押すごとに下記の順番にモードが切り替わります。

1 回押す : Lift/Lモード (L = 弱レベル) ... 白ランプが点灯する



2 回押す : Lift/Hモード (H = 強レベル) ... 青ランプが点灯する


- ・ボタンを長押し (約 2.5 秒) すると本体電源が切れ、青ランプが消灯する。

## ご使用前に

### Clean/Moist モードの切替

- ・ Clean モードはイオン導出 + 振動 + HOT(約 40℃) の 3 機能を搭載しています。洗顔で落としきれない汚れをじんわり温めることで取りやすくします。
- ・ Moist モードはイオン誘導 + 振動 + HOT(約 40℃) を組み合わせて、美容成分をしっかり浸透させ、みずみずしい美肌へ導きます。※角質層まで

Clean/Moist モードボタンを押すごとに下記の順番にモードが切り替わります。

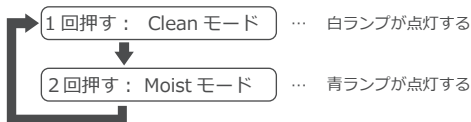


- ・ ボタンを長押し (約 2.5 秒) すると本体電源が切れ、青ランプが消灯する。

1. Clean/Moist モードを使用する場合、必ずご本人で操作を行ってください。
2. ケアを行う時には、必ず本体両側のサイドプレートに触れるように持ってください。
3. 化粧水もしくは美容液をコットンに十分に塗布して使用してください。  
少ないとイオンの伝達が悪くなり、効果が低下したり、肌トラブルの原因となります。

### Eye Care/Cool モードの切替

- ・ Eye Care モードは温冷循環効果とやさしいバイブレーションで目元ケアを行います。  
※温感は約 40℃、冷感は約 12℃。
- ・ Cool モード (※) はひんやり冷感でお手入れをした後のお肌をクールダウンします。

Eye Care/Cool モードボタンを押すごとに下記の順番にモードが切り替わります。

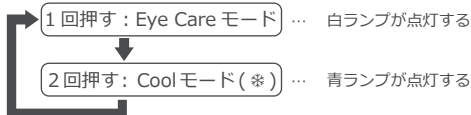

- ・ ボタンを長押し (約 2.5 秒) すると本体電源が切れ、青ランプが消灯する。

### 本体の電源を切る

- ・ ボタンを短押しするとモードが自動的にスタートし、押すたびに切り替わります。
- ・ ボタンを長押しする (約 2.5 秒) と電源が切れます。
- ・ 各モードで 5 分間連続使用すると自動的に電源がオフになります

## ご使用前に




ご使用前にお読みになり、お守りください。

### 皮フ試験 (パッチテスト)

肌トラブル防止のため、使用する化粧品と本製品との相性を、事前にご確認ください。

1. 腕の内側を石けんで洗い、タオルで水分を拭き取る。
2. 保湿・ブライティングモードに設定する。  
(P.34 手順 1 ~ 4 参照)
3. 腕の内側に、化粧水または美容液を含んだコットン部分を動かしながら約 10 秒間あてる。
4. 48 時間が経過した後、肌に異常がないか確認する。  
異常が見られる場合は、使用をお控えください。

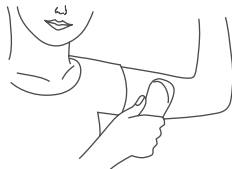

### 使用前の洗顔

本製品をご使用前に洗顔を行ってください。  
ピーリングや除毛直後の肌には使用しないでください。

### プレートの温度チェック

HOT は約 40℃、COOL は約 12℃の設定になっていますが周囲の環境温度、充電電池残量、連続使用回数による内部温度によって前後する場合があります。

**必ず指でプレートの温度を確認してから、ご使用ください。**


### Lift/Clean/Moist モード使用時

Lift モード・Clean/Moist モードを使用する時は眼球付近に使用しないでください。


## ご使用前に

### ● コットンリングの取付方法

- ①本体にコットンリングを装着します。
  - ②コットンをプレートの上に置きます。
  - ③コットンリングの上部を上から閉めてコットンを挟んで固定します。
- ※使用するコットンが厚すぎると、リングで挟めないことがあります。

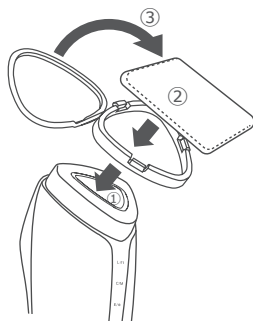

### ● コットンに化粧水を塗布する

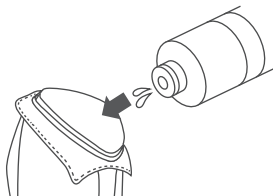

### ● コットンリングの外し方

矢印の方向からコットンリングを外します。

※コットンリングを外す際は、無理な力を加えないでください。破損の原因となります。

※付属のコットンサービス品の為、別売してありません。

※電源をオフにした状態で脱着してください。



## プログラム一覧

ケアに応じて、プログラム選択してください。

目的	モード	化粧品	使用頻度 目安時間
クレンジング (P.33)	Clean (HOT+ 振動+ イオン導出)	コットンリング + 化粧水・ふきとり化粧水	1週間に2~3回 程度 3分/回
保湿 ブライティング ※ 1 (P.34)	Moist (HOT+ 振動+ イオン誘導)	コットンリング + 化粧水・美容液・乳液 フェイスマスク	1週間に2~3回 程度 3分/回
引き締め (P.36)	Cool(※)	無し	毎日可能 5分/回
アイケア (P.35)	Eye Care (HOT+ 振動→Cool+ 振動)	無しまたは アイクリーム 目もと用美容液 アイケアシート	毎日可能 5分/回
トレーニング ※ 2 (P.32)	Lift/L・Lift/H (EMS)	美容液・美顔器用 EMS ジェル	1週間に2~3回 程度 5分/回

※ 1 ブライティングはビタミン C 成分を含む化粧品・美容液をおすすめします。

※ 2 Lift モードを使用する場合は、必ず化粧水・美容液・美顔器用 EMS ジェルを十分に塗布して使用してください。お肌が乾燥していたり、水分が少ないとチクチクと刺激を感じる場合があります。また、油性化粧品等を使用すると通電を妨げ、正常に肌ケアできない場合があります。

※ Clean モード・Moist モード・Lift モードは眼球付近に使用しないでください。




## ● リフトモード

- Lift モードには微弱な電流が搭載されています。お顔のトレーニングをサポートします。**  
ボタンを短押しするとレベルを調節できます。(L = Low H = High)  
初めてご使用になる場合、デリケートな部位及び使いかたに慣れるまでは、必ず弱レベルで使用してください。肌の状態や使用部位に合わせてレベルをお選びください。
- 肌に美容液もしくは美顔器用 EMS ジェルをしっかりと塗布してください。**  
肌表面の水分が少なくなった場合は補充してください。常に十分にある状態で使用してください。  
※肌が乾燥していたり、水分が少ないとチクチクと刺激を感じる場合があります。  
※油性化粧品等を使用すると通電を妨げ、肌ケアは正常にできない場合があります。
- モードを設定する。**

- Lift モードボタンを 1 回押す。  
Lift/L モードになる。  
白ランプ点灯



- Lift モードボタンを 2 回押す。  
Lift/H モードになる。  
青ランプ点灯

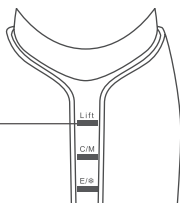

- 矢印の順に沿って肌にあてて、ケアを行ってください。(左右同様に)**

優しくなでるようにプレート部分を動かしてください。  
プレート部分を肌に強く押しつけたり 5 秒以上、一定の部位にあて続けしないでください。  
※眼球の付近に使用しないでください

- 使用後は電源をオフにする。**

ボタンを長押し (約 2.5 秒) すると本体電源が切れます。  
Lift ランプは消灯します。





※ Lift モードは 5 分間連続使用すると自動的に電源がオフになります。

## ● クリーンモード

1. プレートにコットンを取り付ける。(P.30 参照)
2. コットンに化粧水または、ふきとり化粧水を塗布する。  
コットンの裏側までしみこむようにしてください。
3. モードを設定する。

○ Clean/Moistモードボタンを1回押す。  
Cleanモードになる。  
白ランプが点灯

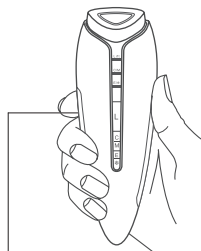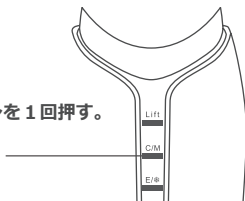

4. サイドプレートにしっかり触れるように本体を握る。  
必ず本体両側の【サイドプレート】に触れるように持って  
ください。
5. プレートの温度を指で確認してからトリートメント  
したい部位にあてる。

6. 矢印の順に沿って肌にあてる。(左右同様に)  
※ プレート部分を肌に強く押しつけたり5秒以上、同一の  
部位にあて続けしないでください。  
※ コットンの水分が少なくなった場合は補充してください。

7. 使用後は電源をオフにして、コットンを外す。  
ボタンを長押し(約2.5秒)すると本体電源が切れます。  
C/Mランプは消灯します。




- ※ Cleanモードは5分間連続使用すると自動的に電源がオフになります。
- ※ コットンの再利用はしないでください。肌トラブルの原因になります。

## ● モイストモード

1. プレートにコットンを取り付ける。(P.30 参照)  
※フェイスマスクを使用する際は不要です。
2. コットンに化粧水・美容液・乳液のいずれかを塗布する。  
コットンの裏側までしみこむようにしてください。  
※フェイスマスクを使用する際は不要です。
3. モードを設定する。

○ Clean/Moistモードボタンを2回押す。  
Moistモードになる。  
青ランプが点灯

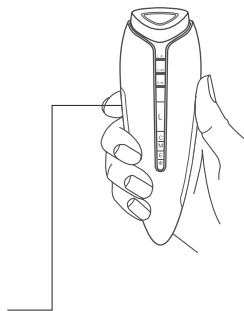

4. サイドプレートにしっかり触れるように本体を握る。  
必ず本体両側の【サイドプレート】に触れるように持ってください。
5. プレートの温度を指で確認してからトリートメントしたい部位にあてる。
6. 矢印の順に沿って肌にあてる。(左右同様に)

- ※ プレート部分を肌に強く押しつけたり5秒以上、同一の部位にあて続けしないでください。
- ※ コットンの水分が少なくなった場合は補充してください。

7. 使用後は電源をオフにして、コットンを外す。  
ボタンを長押し(約2.5秒)すると本体電源が切れます。  
C/Mランプは消灯します。



- ※ Moistモードは5分間連続使用すると自動的に電源がオフになります。
- ※ コットンの再利用はしないでください。肌トラブルの原因になります。

## ● アイケアモード

### 1. モードを設定する。

○ Eye Care/Cool モードボタンを1回押す。

Eye Care モードになる。  
白ランプ点灯



Eye Care モードでは下記の順番に自動的に切り替わります。合計約5分間で2セットのケアとなります。

HOT+ 振動 約90秒



COOL+ 振動 約60秒



HOT+ 振動 約90秒



COOL+ 振動 約60秒



本体電源がオフする

※左右の目元に各1セットのケアをおすすめします。

### 2. プレートの温度を指で確認してからトリートメントしたい部位にあてる。

### 3. 目の周りであててケアを行ってください。(左右同様に)

- ※ プレート部分を肌に強く押しつけたり5秒以上、同一の部位にあて続けしないでください。
- ※ まぶたや、涙袋にあてる時は温度に注意してください。

### 4. 使用後は電源をオフにする。


ボタンを長押し(約2.5秒)すると本体電源が切れます。  
E/※ランプは消灯します



※ Eye Care モードは5分間連続使用すると自動的に電源がオフになります。

## ● クールモード

1. モードを設定する。

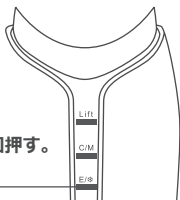

○ Eye Care/Cool モードボタンを2回押す。  
Cool モードになる。  
青ランプ点灯

2. プレートの温度を指で確認してからトリートメントしたい部位にあてる。

3. 矢印の順に沿って肌にあてる。(左右同様に)

※プレート部分を肌に強く押しつけたり5秒以上、同一の部位にあて続けしないでください。

4. 使用後は電源をオフにする。

ボタンを長押し(約2.5秒)すると本体電源が切れます。  
E/※ランプは消灯します。



※ Cool モード(※)は5分間連続使用すると自動的に電源がオフになります。

※ Cool モード(※)使用後は本体内部の温度が上昇します。繰り返し使用すると内部の安全装置が起動し、本体内部の温度が下がるまでは作動しない場合があります。続けて使用する場合は、電源をオフにして本体を30分以上休ませてからご使用ください。

## お手入れ方法

- 使用後は本製品を清潔に保つために、毎回お掃除をしてください。
- お手入れ及び、本製品を移動させる場合は安全のため電源を切り、充電用ケーブルを抜いてから行ってください。
- 使用後は清潔な布を水で濡らして固く絞り、プレートや本体の汚れをふき取ってください。薬品等は絶対に使用しないでください。
- 本体充電コンタクトおよび、台座充電コンタクトが汚れていると正常に充電できなくなる場合があります。
- 本体に強い水流をあてたり、水中に沈めないでください。
- 台座に水をかけないでください。

## 保管方法

- 長時間使用しない場合は、最低限 3 ヶ月ごとにフル充電してください。バッテリー残量がゼロの状態では長期間保管すると、バッテリーの寿命が著しく短くなります。
- 長時間使用しないときは、本製品の掃除をして、よくかわかしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源を切り、充電アダプターをコンセントから抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所には放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 子供の手やペットの触れない場所に保管してください。

## こんなときには

トラブル	対処方法
電源が入らない	<p>▶ <b>電源ボタンを押していない</b></p> <p>いずれかのモードボタンを押すと電源が入り、本体を起動できる。</p> <p>▶ <b>充電されていない</b></p> <p>本体を充電してください。</p> <p>▶ <b>内部が高温になっている</b></p> <p>しばらく時間をおいてから使用してください。</p>
充電しても使用できない  ランプが点滅して すぐに電源が切れる	<p>▶ <b>充電されていない</b></p> <p>Liftモードランプが白点灯するまで充電してください。</p> <p>▶ <b>電池の寿命</b></p> <p>充電電池の寿命です。 ※電池の交換は行えません。</p> <p>▶ <b>しばらく時間をおいてから使用してください</b></p> <p>本体の温度が上昇し、安全装置が起動しています。しばらく時間をおいてからご使用ください。</p>
Clean/Moist/Lift モードを 正しく使うには？	<p>▶ <b>肌とプレートとの間にしっかりと水分を保つ</b></p> <p>水分が少ないと電気の伝達が悪くなり効果が低下したり、肌トラブルの原因となります。</p> <p>▶ <b>サイドプレートに使用者本人が触れるように本体を握り、本体下部の充電コンタクトに触らないようにしてください。</b></p>

## こんなときには

トラブル	対処方法
充電されない (充電ランプがつかない)	▶ ACアダプターが壁面コンセントに差し込まれていない ACアダプターを壁面コンセントに直接差し込んでください。
	▶ ケーブルプラグが差し込まれていない プラグがアダプター、台座に奥まで差し込まれているか確認してください。
	▶ 本体充電コンタクトと台座充電コンタクトが汚れている 充電コンタクトを清掃してください。
Lift モードランプが 赤点減している	▶ バッテリー残量が少ない 充電してください。
使用後に本体が 熱くなる	▶ しばらく時間をおいてから使用してください
プレートが冷たく ならない、または 熱い	▶ 連続使用している 短時間に繰り返し使用すると本体内部の温度が上昇し、Eye Care モード / COOL モード (※) の温度が冷えにくくなったり、Clean/Moist モードで熱くなることがあります。しばらく時間をおいてからご使用ください。
	▶ 环境温度や肌の温度によって左右されている 使用環境の温度によって、プレート温度は若干左右されます。冬場は肌の表面温度が低いため、Clean/Moist モードが熱く感じたりすることがあります。



## こんなときには

トラブル	対処方法
イオンを感じない	<b>イオンは体感できません</b> イオンは微弱電流の為、体感することができません。
Lift モードで肌がちくちくする	<b>肌が乾燥していたり水分が不足している</b> 美容液・美颜器専用 EMS ジェルを塗布してください。

## Q & A

### ●よくある質問と回答

Q. 毎日プログラムを行っても大丈夫ですか？

A. P.31 の使用頻度・時間をご参照ください。過度な使用はお肌に負担をかける可能性があります。肌の様子を見ながらご使用ください。

Q. 化粧水や美容液は1回にどれくらい使用すればよいですか？

A. コットンの裏側までしみこむようにしてください。

Q. 化粧水や美容液の種類は？

A. 普段お客様が使用されている化粧品をお使いください。

※お使いの化粧品によっては Moist モードが合わない場合がございます。

※ブライティングはビタミンC成分を含む化粧品・美容液をご使用ください。

Q. 使用前の洗顔はどのくらい？

A. ピーリングなど刺激の強い洗顔料は使用しないでください。

Q. フェイスマスクでEMSを使用できますか？

A. お勧め致しかねます。マスクの材質、厚み、化粧品成分によって正常に通電しない可能性があります。

Q. お風呂で使用できますか？

A. 本製品は防水規格 IPX5 を取得しておりますが本体に近距離で直接強い水流を当てたり、水中に沈めることはできません。また充電台座、充電器は防水ではございません。

Q. 化粧の上から使用できますか？

A. COOL モード(※)の使用は可能です。メイク直しの前に COOL モード(※)を使用すると、化粧のノリがアップします。

Q. どんな肌質でも使えますか？

A. ニキビや肌の炎症がひどいときや、金属アレルギーをお持ちの場合はご使用をお避けください。詳しくは安全上の注意をご参照ください。