




 COSBEAUTY

**COSBEAUTY
RF 美顔器**

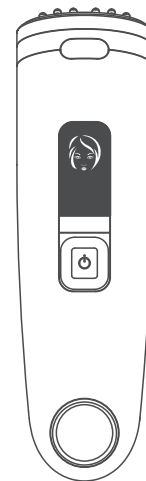

取扱説明書・保証書付

本書は製品の説明書および保証書となります。
ご使用前に必ずよくお読み頂き大切に保管してください。

目次

目次	19
安全上の注意	20～23
セット内容	24
各部名称	25
充電方法	26
ご使用前に	27
使用手順	28～30
ご使用の後のお肌のお手入れ	31
ジェルについて（別売品）	31
コースについて	31
本体のお手入れ	32
保管方法について	32
こんなときは	33,34
Q & A	35
仕様	36

安全上の注意

- ご使用になる前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使い頂き、お使いになる人や、他の人々への危害や財産の損失を未然に防ぐものです。必ずお守りください。

危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性があり、リスクの度合いが高いと想定される内容を示しています。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

※物的損害とは、家屋、家財、家畜、ペットに関わる拡大損害を示しています。



禁止の行為であることを知らせるものです。



行為を強制・指示する内容を知らせるものです。

危険

下記の電子機器との併用は絶対にしないでください。



禁止

- ペースメーカーなどの体内植込型医用電子機器
- 人工肺などの生命維持用医用電子機器
- 心電計等の装置型医用電子機器
- その他の治療器具との同時使用はしないでください。誤作動をまねく恐れがあります。

安全上の注意



警告

次のような人は使用しない、または医師に相談してください。

- 知覚や痛覚に障害がある方
- 顔面神経に障害がある方
- 妊娠中または授乳中の方
- アトピー性皮膚炎の方
- アレルギー体質・金属アレルギーの方



使用前
に相談

- 特に肌が敏感な方
- ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方
- 心臓に障害のある方
- 急性(疼痛性)疾患のある方
- 悪性腫瘍のある方
- 有熱性疾患の方
- 血圧異常の方
- 感染性疾患の方
- 結核症疾患の方
- 血友病疾患の方
- 歯の治療中の方
- 銀歯、インプラントが入っている方
- 飲酒、薬を服用中、疲労が著しい時

次の部位には使用しないでください。

- 目や喉ぼとけ、耳のまわり、眼球及び上まぶた、涙袋、こめかみ、鼻、唇
- 切り傷・整形手術をした部位・口内や陰部、粘膜など
- 顔面黒皮症の部分
- ニキビや吹出物で炎症を起こしている部分
- 化粧品などで、炎症を起こしている部分
- 痛覚、知覚障害を起こしている部分
- 皮膚の下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んである部分
- 痒みやほてり、物理的刺激などによる病的なシミのある部分
- 肌に炎症や異常を感じている部分
- 指定された用途以外の目的で使用しないでください

安全上の注意



禁止

- 本製品に付属している充電アダプター以外使用しないでください。故障の原因となります。
- 100~240V以外の電源を使用しないでください。火災や感電の可能性があります。
- 本製品、ユニット部、充電アダプターが破損や変形をしている時は使用しないでください。
- 充電アダプターが破損した場合、純正品のアダプターと交換してください。純正品以外のアダプターを使用しますと重大な事故やトラブルにつながる恐れがあります。
- 本体、充電アダプター、充電台座は防水ではありません。濡れた手で触れたり、コンセントを抜き差ししないでください。
- 本製品は湿気の多い場所では充電しないでください。
- 電池の寿命を維持するために、最低3ヶ月毎に本製品をフル充電してください。
- 本製品にはリチウムイオン電池を使用しています。火の中に入れて、加熱したりしないでください。(廃棄の際はお客様がお住いの各自治体にお問い合わせの上、指示に従って廃棄してください。)
- 絶対に製品を改造・分解・修理しないでください。
- 乳幼児や子供に使用したり、手の届くところでの使用や保管をしないでください。



必ず
守る

- 使用しない時は、充電アダプターをコンセントから抜いてください。
- 本体に異音や異常(過熱や焦げた臭いがする等)を感じた場合はご使用を中止し、電源を切ってください。
- 使用時間や使用頻度は取扱説明書の内容をよく読み、守ってください。
- 使用中に痛みや不調を感じた時や、使用后、肌に異常を感じた時は使用を中止して専門医に相談してください。
- 使いはじめの方は、肌の様子を見ながら使用してください。

安全上の注意



注意

- 同じ箇所にあて続けしないでください。やけどの原因となります。
- 美容目的以外には使用しないでください。
- 落としたり、ぶつけたり、本体に強い衝撃を与えないでください。感電・発火・けがの恐れがあります。
- 家族および他人と共有しないでください。感染症の恐れがあります。
- 指を本体円形リングに入れないでください。けがの恐れがあります。
- ペットや家畜等に使用しないでください。
- 火のそばや炎天下、浴室などの高温多湿の場所、可燃性ガス、燃えやすいもののそばに放置や使用、充電をしないでください。また、火中投下したり、熱器具に近づけないでください。



禁止


- 初めて使用する場合は、「使用手順」(28ページ)の使用方法をご参照の上、腕の内側で肌の適応性テストを行ってください。一番低いレベルから徐々にレベルを上げていき、ご自身に丁度良いレベルに調整し、1日観察後、肌に異常が見られなければご使用ください。
- 使用中、使用後に肌の異常がみられるときは使用を中止し、医師に相談してください。
- 使用後に肌が赤くなったり、軽く腫れる場合があります。皮膚の温度が上がリ、血流がよくなったことが要因ですので、異常ではありません。ただし、24時間以内に痛み、水泡、やけど等の症状が出た場合は、使用を中止し、医師に相談してください。
- 本製品は、3分以上使用しなかった場合、自動的に電源が切れる仕組みになっております。




必ず守る

セット内容

- ・RF美顔器本体×1
- ・フェイスクケアユニット×1
- ・アイケアユニット×1
- ・ネックケアユニット×1
- ・キャップ×1
- ・充電台座×1
- ・充電アダプター×1
- ・ブラシ×1
- ・取扱説明書×1
- ・保証書×1

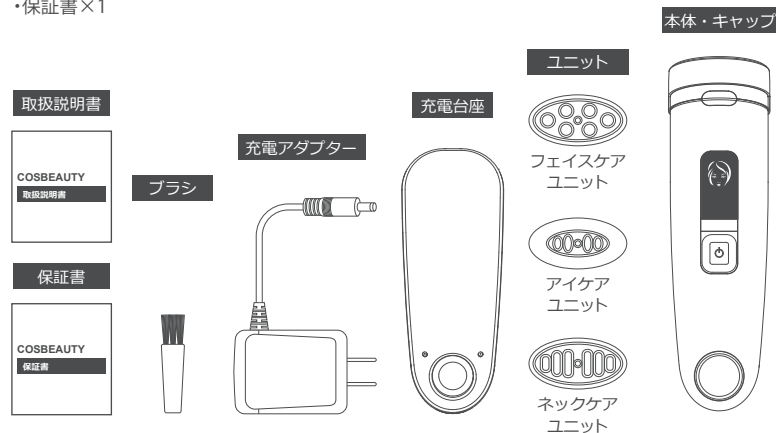

各部名称

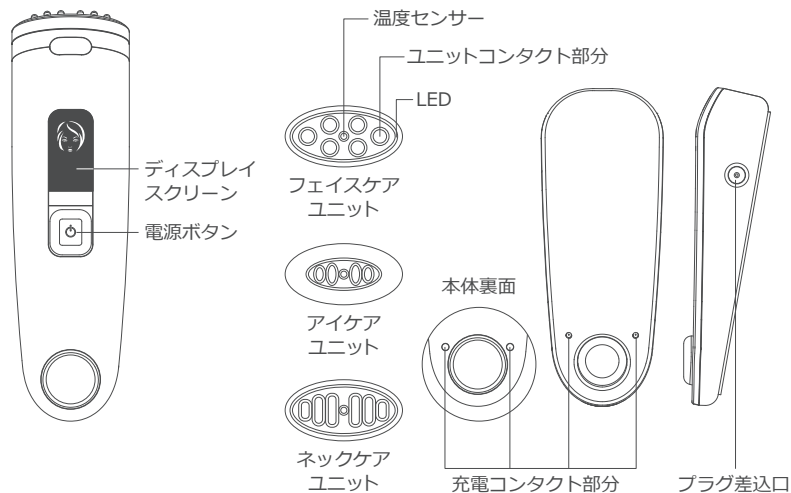


充電方法

● 本体を充電する

初めて本製品を使用する時は必ず充電を行ってください。

1. 付属の充電用ケーブルとアダプターを使い、充電台座に接続して充電を行います。本体を充電台座の上に置き、本体と台座のコンタクトを完全に合わせてください。

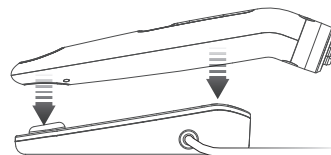

充電の目安

充電時間	動作時間
約3~4時間	約60分

※満充電直後からの動作時間です。

※充電時間、動作時間は使用方法、使用環境、使用頻度によって変わります。

● 充電中の充電ランプ表示

本体の充電が開始されると、充電ランプが下記のように表示されます。ランプが光り、充電状況が確認できます。

20%	40%	60%	80%	100%

● 充電が完了したら

充電が完了したら必ず充電スタンドから本体を外してください。

充電完了から、長時間充電を続けるとバッテリーの寿命が著しく短くなります。

● 充電残量が少なくなるときの表示

充電残量が少なくなると、ディスプレイスクリーンに が表示します。直ちに充電してください。

※バッテリー残量が20%以下になると表示されます。

ご使用前に

● COSBEAUTY無料アプリのインストール

スマートフォンにCOSBEAUTYの無料アプリをインストールすることで、お肌の状態に合わせた美容ケアのご提案をいたします。また、アプリでデータを管理することで美容効果を実感できます。その他に、美容に関するアドバイスを受けることができます。

1. 右記のQRコードからCOSBEAUTYのアプリケーションをスマートフォンにインストールしてください。



iPhone/Android 対応

iPhone/iPad等のApple製品は
APP Store内にて「Cosbeauty」
で検索も可能です。



※アプリケーションを使用した際の機器の故障、破損、データ等の損失については保証いたしかねます。

※アプリケーションは、改良のため予告なく変更される場合があります。

● 使用前に行うこと・守ること

1. 本体を充電してください(P26参照)。
2. メイクを落として、お肌を清潔な状態にします。
3. イヤリング、ネックレス、腕輪等の金属アクセサリー及びコンタクトレンズを外します。

使用手順

① ユニットを取り付けます

使用するユニットを本体に取り付けます。

- ・顔と顎部分は「フェイスクアユニット」をご使用ください。
- ・目の周りは「アイケアユニット」をご使用ください。
- ・首部分は「ネックケアユニット」をご使用ください。

※取り付け上の注意

- (1) 磁力によってユニットが取り付けられます。磁力に反してユニットを強引に逆方向に付けたりしないでください。
- (2) ユニットを交換する時は、ユニットの温度センサーやコンタクトに触れないでください。
- (3) 本体のユニット接続端子には触れないでください。



② ジェル※を塗ります ※別売品

弊社販売の専用ジェルをユニットヘッド面に均一に塗ります。ヘッド面全体にジェルがいきわたるように付けてください。

※お手持ちの水溶性ジェルでもご使用いただけますが、油分や成分によって使用できない事や、お肌のトラブルが起きた場合は保障いたしかねます。

③ 電源を入れます


電源ボタンを軽く押して電源を入れます。電源を入れると本体が自動的に使用部位ごとのユニットを識別し、スクリーンにユニットの名称と使用箇所を表示します。



使用手順

④ レベルを選択します

電源ボタンを軽く押ししてお肌の状態に合わせて、適切なレベルを選択します。
レベル1からレベル3まであり、電源ボタンを押すごとにレベル1→レベル2→レベル3の順にレベルが変わります。
初めて使用する時は、必ずレベル1で使用してください。

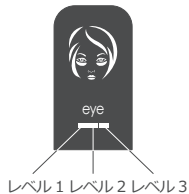

⑤ 肌にあてて、ユニットを軽く移動します

使用部位ごとにユニットを使い分けます。下記を参考に使用してください。

フェイスケアユニット (face unit)	アイケアユニット (eye unit)	ネックケアユニット (neck unit)
各3分ずつ、合計18分	各2分ずつ、合計4分	各3分ずつ、合計6分

※各部位が終わった後、本体が振動して次の部位へ移動することを知らせます。

⑥ 電源を切ります

ご使用後は、電源ボタンを2.5秒程長押しして電源を切ります。

使用手順

※取り扱い上の注意

- ユニットコンタクト全体がお肌に触れるように使用してください。
必ずお肌の上を動かしながら使用してください。
同じ箇所にあて続けるとやけどの原因となります。
- ユニットコンタクトをお肌に強く押さないでください(やけどの原因となります)。
- 下記のイラストのアミ線部分にある、のどの中心(喉ぼとけ)、眼球周辺、まぶた、涙袋、こめかみ、鼻、唇には絶対に使用しないでください。
- 肌が乾燥した状態では使用しないでください。
使用する際は、必ず専用ジェル(別売品)をご使用ください。
必要に応じてジェルを補充してください。より高い効果が望めます。
- 本製品は、3分以上使用しなかった場合、自動的に電源が切れます。



使用できない部位

ご使用後のお肌のお手入れ

● お肌のお手入れ

ご使用後は、温水で肌に残ったジェルを洗い流してください。
コスビューティー専用ジェルをご使用の場合は拭き取りのみでも問題ございません。
必要に応じて、お肌のお手入れをしてください。

ジェルについて(別売品)

専用ジェル

本製品を効率よく使用できるようにコスビューティー専用ジェル(CBケア美容ジェルR/CBケア美容ジェルB/CBケア美容ジェルM)をご用意しております。
お肌に合わせてご使用ください。

※取り扱い上の注意

- ・ジェルは開封後、12ヶ月で使い切ってください。
- ・ジェルのご購入は、COSBEAUTYオンラインショップ(www.cos-beauty.com) * よりお求めください。
- ・販売国によって一部取り扱いの商品が異なる事がございます。
- ・予告なく販売を終了する場合があります。

* 日本のみ




コスビューティー専用ジェル

コースについて

- ①最初の3ヶ月は毎週1~3回のご使用をおすすめします。3ヶ月目以降は、ご自身の使用頻度に応じてご調整ください(毎月4回をおすすめします)。
- ②2日連続で同じ箇所を使用しないでください。
- ③COSBEAUTYのアプリ(ダウンロード方法は27ページをご参照ください)を通じてコースをリクエストできます。

本体のお手入れ

- ①本体は防水ではありません。濡れた布等でお手入れしないでください。ユニットコンタクトは流水で洗うことはできませんが、水の中に直接浸さないでください。浸水して故障の原因となります。
- ②本製品を使用後は、ティッシュペーパー等を使って本体の汚れを拭き取り、付属のブラシを使ってユニットをきれいにお掃除してください。
風通しが良く、直射日光の当たらない場所で、十分に乾かした後、保管してください。充電コンタクトに汚れがある場合は、ティッシュペーパーまたは乾いたタオルできれいに拭き取ってください。
※汚れ、脂、ジェル等が残っていると、温度センサーが温度を正しく感知せず、低温やけどの原因となります。

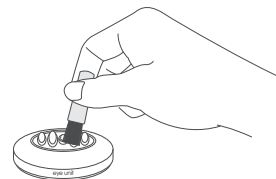

保管方法について

- ①長期間使用しないときは本製品の掃除をして、よく乾かし、直射日光の当たらない涼しいところで保管してください。
- ②硬いものとの接触を避けてください。製品を破損する危険性があります。
- ③本製品およびパーツを湿気の多い環境で長期間保管しないでください。製品の性能に悪影響を与える可能性があります。
- ④保管する時は電源を切ってください。
- ⑤充電完了後、持続的に長期間充電し続けると、バッテリーの寿命に影響する可能性があります。
- ⑥長期間使用しない場合は、最低3ヶ月毎にフル充電し、バッテリーの寿命を維持してください。
- ⑦製品を廃棄する際はお客様がお住いの各自治体にお問い合わせの上、指示に従って廃棄してください。

こんなときには

トラブル	対処方法
電源が入らない	▶ 充電されていない 本体を充電してください。
充電されない (充電ランプがつかない)	▶ 充電アダプターが通電していない 充電アダプターを抜いて、改めて差し込んでください。
	▶ 電源が不足している 壁のコンセントから直接電源を取ってください。
	▶ 本体と充電コンタクトが接触していない 本体と充電コンタクトが接触しているかご確認ください。 また、充電コンタクトの汚れを清掃してください。
ディスプレイ スクリーンに ユニットが表示 されない	▶ ユニットを取り付けていない ユニットを取り付けてください。
	▶ ユニットが接触していない ユニットの取り付けを確認してください。 ユニットを抜いて改めて差し込んでください。
	▶ 本体ユニット端子が汚れている またはユニットの端子接続部分が汚れている 付属のブラシで清掃してください。

こんなときには

トラブル	対処方法
熱感がない	▶ 正しくユニットを取り付けていない ユニットを正しく取り付けてください。正しく取り付けると、ユニットのLEDが白く光り、ディスプレイスクリーンにユニット名が表示されます。
熱感が強い	▶ ジェルを使用していない 専用ジェルをご使用ください。
	▶ レベル選択ミス レベルを下げてください。
	▶ 操作手順ミス 動かす速度を早くしてください。または、動かす範囲を広げてください。
熱感が弱い	▶ ジェルが足りていない ジェルを補充してください。
	▶ ジェルを使用していない 専用ジェルをご使用ください。
	▶ レベル選択ミス レベルを上げてください。
	▶ 操作手順ミス 動かす速度を遅くしてください。または、動かす範囲を狭めてください。

Q & A

●よくある質問と回答

Q. ジェルは1回にどれくらい使用すればよいですか？

A. 本製品の特長として、ジェルを多く使用した方が、より温熱の体感を得ることができます。目安として、ユニット全体がジェルで覆われるくらい使用してください。ジェルが少ないと感じたら付け足すことをおすすめします。

Q. お風呂で使用できますか？

A. お風呂では使用しないでください。本製品は防水製品ではありません。

Q. 使用後に肌がほてります

A. RFの温めによるものです。気になる場合は保冷剤等を使用するなどして、お肌を冷やしてください。

Q. ピリピリ感があります

A. レベルが強い可能性があります。レベルボタンでレベル調節を行ってください。心地よいと感じる強さで使用してください。初めて使用する場合や使い方に慣れるまでは、必ずレベル1で使用してください。本機とジェルが合わない可能性があります。弊社の専用ジェルを使用してください。

Q. 使用時にRFの温まりを感じません

A. ユニットをゆっくり動かしたり、軽く押し当ててみてください。また、ジェルが足りない可能性がありますので、ジェルを足してください。

Q. ユニットが温まりません

A. RFはユニットを温めるのではなく、電気のお肌を温めるものです。

仕 様

品 名	COSBEAUTY RF美顔器
サ イ ズ	本体 約W43×H175.4×D53(mm)
重 量	約178g (3つのユニットとキャップを含む)
電 源	12V=== 1A
本 体 出 力	5W
充 電 時 間	約3~4時間
使 用 時 間	約60分
作 業 温 度	0~40℃
保 存 温 度	0~50℃
バッテリー	リチウムイオン電池 900mAh
防 水 等 級	IPX5(ユニットのみ)※本体、充電器は防水ではありません

■アダプター

電 源	入力AC100-240V
-----	--------------

電池の破棄

本製品にはリチウムイオン電池が使用されています。廃棄の際はお客様がお住いの各自治体にお問い合わせの上、指示に従って廃棄してください。